

アイルウォーク α

理学療法士と共同開発

優れた機能と安全性を、
美しいデザインに込めて。



安心・安全

折りたたみ時や座面をおろした時に自動でブレーキが作用



歩行しやすい

自動ブレーキ解除や2段階キャスターで歩行が楽に



便利な機能

使いやすい杖置きやバッグを装備



美しいデザイン

出かけたくなるお洒落なデザイン

アイルウォーク^{アルファ}α 6つの特徴

2. 機能的な 2段階キャスター

直進



訓練時は直進に固定すれば安定した歩行が行えます。

左右
60°



左右 60°にも可動できるので、おでかけの際スムーズに歩けます。

3. バッグは取り外して 利用できます



バッグを取り外し、ショルダーバッグとしてそのままお使いいただけます。

4. 高級感漂うシックな デザイン



シックなカラーとキルティング生地で、高級感漂うデザインとなっています。

5. 杖が落ちない 嬉しい設計



杖置きをプッシュ式にする事により、折りたたみ時に杖が落ちる事がありません。

1. 自動でブレーキが 作動&解除

ブレーキ



座面を下ろすと自動的にブレーキがかかるので座る時に安全です。

ブレーキ
解除



座面を上げると自動的にブレーキが解除され、歩行しやすくなります。

ブレーキ



折りたたみ時にも自動的にブレーキがかかるので安心です。

6. ブレーキは片方 だけでも作動



左右どちらかを握ればブレーキがかかります。握り心地も軽く、扱いやすくなっています。


理学療法士の観点^が活かされています



理学療法士 平松 崇典

正しい姿勢の保持に加え安全性を重視しました

座面を下ろした状態で使用すると、身体が歩行器から離れ前傾姿勢となり正しい姿勢が保てません。アイルウォークαなら座面を上げた状態でしか歩行器が動かないので、自然と良い姿勢が保てます。

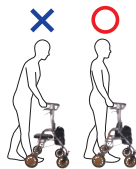

理学療法士 片山 準平

抜群の安定性で歩行練習にも最適です!!

前輪タイヤにスタビライザーを付ける事で左右のタイヤが同時に動く事になり、歩行器の安定性が大幅に向上しました。歩行時のバランスが不安定な方や、従来の歩行器では前輪をうまくコントロール出来なかった方でも安心して歩行練習が行えます。



スタビライザー

製品仕様

価格	¥52,900 (税別)
バッグの積載量	3kg
耐荷重	75kg
キャスター径	18.5cm
前輪タイヤ	2WAY 固定と左右 60度
材質	アルミ
TAISコード	01446-000001

寸法

使用時			収納時		
H	W	D	H	W	D
約79.5 ~88.5 (4段階)	約51.5	約62	約85	約51.5	約38

(単位cm)

重量

全体	車体のみ	袋・座面・背もたれ
約6.4	約5.6	約0.8

(単位kg)

※カタログと実際の製品の色・柄は多少異なる場合があります



AILINK Tel (086) 238-1517

〒700-0971
岡山市北区野田3-16-1 下電開発ビル2階
Fax (086) 238-1519